



## Stabilna jasnoća vida i udobnost

AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM karakterizira visok nivo kvalitete vida i udobnost nošenja od samog početka i ostaje nepromijenjena do predviđene izmjene.

Stabilna jasnoća vida tijekom cijelog propisanog vremena nošenja kontaktnih leća<sup>15</sup>

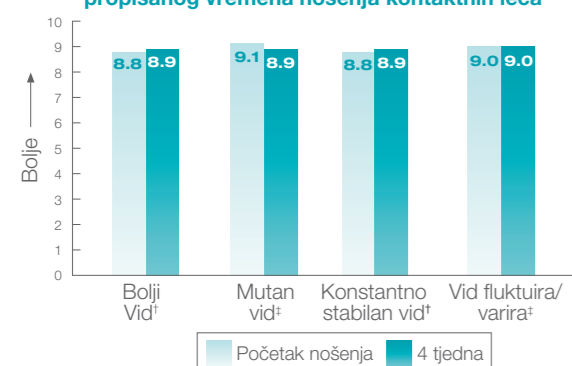

Odlična udobnost tijekom cijelog propisanog vremena nošenja kontaktnih leća<sup>16</sup>

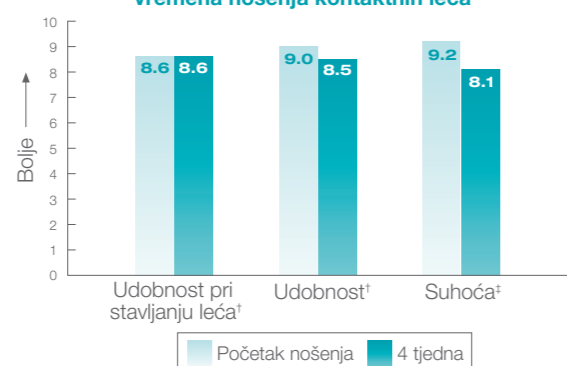

<sup>†</sup> ocjenjuje se stupanj zadovoljstva u rasponu od 1 do 10; 1 je slabo, a 10 odlično. <sup>‡</sup> ocjenjuje se učestalost simptoma u rasponu od 1 do 10; 1 je stalno a 10 nikada.

## Za zdravije očiju Vaših pacijenata— i za Vaš uspjeh

Dobrobiti koje pruža AIR OPTIX for ASTIGMATISM mnogo znače Vašim pacijentima — a još i više Vama. Ove leće nude:

- Kraće vrijeme pregleda
- Veće zadovoljstvo pacijenata
- Sigurnost koju nudi nošenje zdravih kontaktnih leća
- Izvrstan vid

Općenito, pacijenti daju prednost AIR OPTIX for ASTIGMATISM u usporedbi sa SofLens66® Toric, Biomedics® Toric, ACUVUE® ADVANCE™ for Astigmatism i PureVision® Toric.\*

\*Mjereno na četiri tjedna p<0,005.



## Leće koje dišu za zdravije očiju Vaših pacijenata.



AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM		
DIOPTRIJE SFERE (D):	DIOPTRIJE CILINDRA (D):	OSI:
<b>POČETNI PARAMETRI</b>		
0.00 do -6.00, u koraku 0.25	-0.75, -1.25	Puni krug u koracima od 10°
<b>USKORO DOLAZI</b>		
0.00 do -6.00, u koraku 0.25	-1.75, -2.25	Puni krug u koracima od 10°
-6.50 do -9.00, u koraku 0.50	-1.25, -1.75	90° i 180° +/- 20° u koracima od 10°
+0.25 do +6.00, u koraku 0.25	-0.75, -1.25, -1.75	90° i 180° +/- 20° u koracima od 10°
<b>MATERIJAL:</b> lotrafilcon B	<b>Dk, Dk/t:</b> 110, 108 @ -3.00D	<b>PROMJER:</b> 14.5mm
<b>BAZNA ZAKRIVLJENOST:</b> 8.7mm		
<b>POVRŠINA:</b> Trajni plazma tretman		
<b>SADRŽAJ VODE:</b> 33%		
<b>DIZAJN</b>		
<b>STRAŽNJA POVRŠINA:</b> Torična		
<b>STABILIZACIJA:</b> Precision Balance 8 4™ dizajn		
<b>DEBLJINA U CENTRU:</b> 0.102mm @ -3.00D		
<b>OZNAKE:</b> Linije na 3.6 i 9 sati (linija na 6 sati nešto je šira od linija na 3 i 9 sati)		
<b>TINKTURA:</b> Plavo tinktirano		
<b>ODOBRENI RASPORED NOŠENJA:</b> Dnevno nošenje		
<b>PREPORUČENI RASPORED ZAMJENE:</b> Četiri tjedna		

Posjetite [www.splendor.hr](http://www.splendor.hr) kako biste saznali više o revolucionarnim AIR OPTIX for ASTIGMATISM.

Ciba Vision zastupnik i distributer  
**Splendor**  
splendor@splendor.hr, www.splendor.hr


Svjetski vođa u tehnologiji silikon hidrogel kontaktnih leća

cibavision.com

\*AIR OPTIX for ASTIGMATISM Dk/t = 108 @ -3.00D, -1.25D x 180. Dnugi čitatelji mogu utjecati na zdravije oči. \*\* Mnogi čitatelji utječu na zdravije oči. ADLUE je registrirana robna marka i ADVANCE je robna marka Johnson & Johnson Vision Care Inc. PureVision i SofLens66 su robne marke Bausch&Lomb Inc. Biomedics je robna marka CooperVision Inc. **Važne informacije za AIR OPTIX for ASTIGMATISM:** Za dnevno nošenje, za astigmatizam. Rizik od ozbiljnih problema povećava se kod produženog nošenja. U rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom vida. Mogu se pojaviti nuspojave poput osjećaja neugode ili blagog pečenja. **Reference:** 1. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 2. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 3. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 4. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2005. 5. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 6. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2005. 7. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2005. 8. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2005. 9. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 10. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 11. Kalkulacije bazirane na vrijednostima Dk u Tybers Quarterly – prosinac 2006. 17. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. 18. Ciba Vision podaci u dokumentu, 2006. © 2007 Ciba Vision Corporation CV-HW-AIR-SA-070710

**CIBA Vision**  
A Novartis Company

# Fit Uspješan. Prvi puta. Svaki puta.

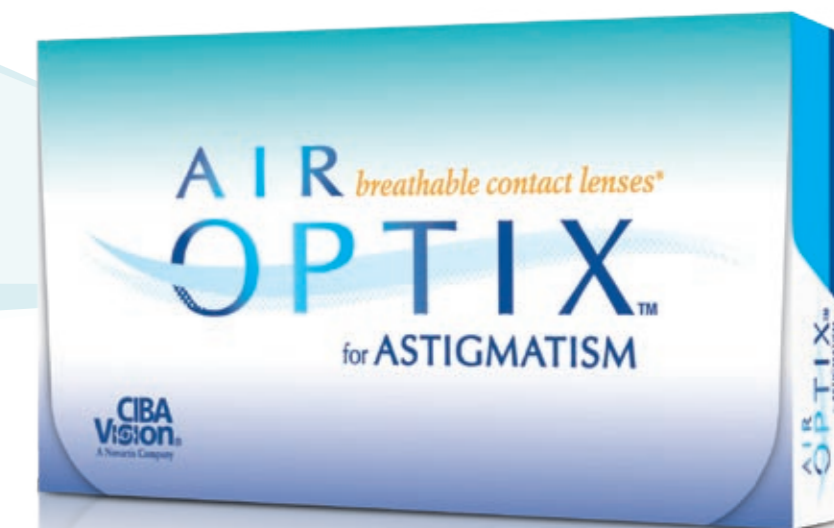

### NAPRAVITE ZDRAV ODABIR™

za Vaše pacijente koji nose meke kontaktne leće

Preporučite čišćenje AOSEPT® PLUS otopinom za čišćenje i dezinfekciju ili SOLOCARE AQUA® višenamjenskom otopinom.

PREDSTAVLJAMO  
**AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM**  
S REVOLUCIONARNIM


PRECISION BALANCE **8|4™** DIZAJNOM

**CIBA Vision**  
A Novartis Company

## Većina pacijenata s astigmatizmom ne dobiva ono što očekuje od svojih toričnih leća.

- Mnogi pacijenti još uvijek nose torične leće stare tehnologije koje imaju Dk/t oko 16<sup>1</sup>
- Postotak odustajanja od nošenja kod toričnih leća gotovo je dvostruko veći od postotka odustajanja kod sfernih leća<sup>2</sup>
- Simptomi kao što su suhoća očiju, neudobnost, crvenilo i fluktuirajući vid često se navode kao problemi

### Uobičajeni problemi koji se pojavljuju kod pacijenata koji nose kontaktne leće od HEMA<sup>3</sup> materijala

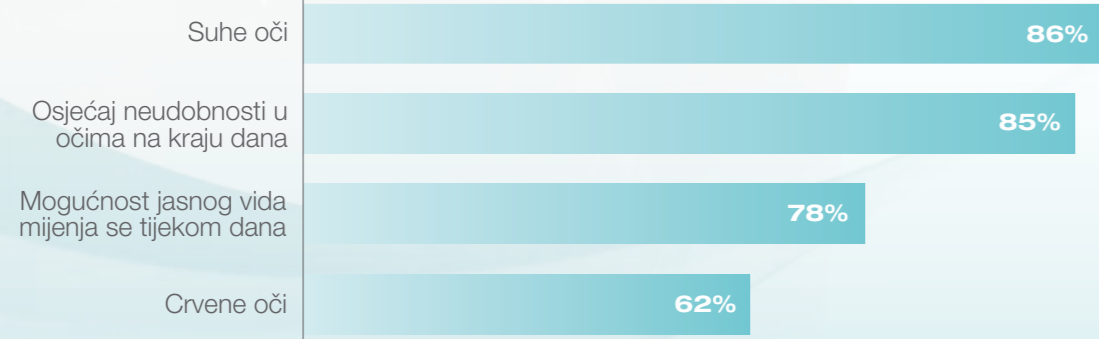

## AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM — revolucionarni dizajn pruža izvanredne osobine

S revolucionarnim dizajnom, AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM omogućuje uspjeh pri prvom fitanju, pružajući iznimnu stabilnost, predvidljivost i jasan vid – sve to u svjetskoj klasi AIR OPTIX obitelji silikon hidrogel leća.

### Uspješan prvi fit

- 95% pacijenata uspješno je fitano s prvim lećama<sup>4</sup>
- 99% leća pruža prihvatljiv ili optimalan fit<sup>4</sup>
- AIR OPTIX for ASTIGMATISM kontaktne leće stabiliziraju se na oku u samo 30 sekundi<sup>5</sup>

### Stabilnost i predvidljivost

- 88% leća stabilizira se na oznaku 6 sati unutar osi od 5° do 90°<sup>6</sup>
- 98% ima otklon od 5° ili manje kod treptaja<sup>4</sup>
- 88% leća nije pokazalo decentralizaciju pri kontrolnom pregledu<sup>4</sup>
- Način fitanja leća i orijentacija osi jednaki su od pacijenta do pacijenta stoga možete biti sigurni svaki put kada fitate AIR OPTIX for ASTIGMATISM

### AIR OPTIX for ASTIGMATISM leće imaju revolucionarni dizajn

#### Široka optička zona

- Pruža izvrsnu oštrinu vida<sup>7</sup>
- Mali iznos potrebne prizme u optičkoj zoni smanjuje debljinu leće i pruža maksimalan Dk/t<sup>8</sup>

#### Ujednačen rub

- Pruža izuzetnu udobnost



PRECISION BALANCE 8|4™

#### Tri oznake

- Oznake na 3,6 i 9 sati olakšavaju promatranje rotacije leće i stabilnosti

#### Precision Balance 8|4 dizajn


- Najdeblje točke leće su na 8 i 4 sata
- Smanjuje interakciju s donjom vjeđom i pruža izuzetnu udobnost<sup>9</sup>
- Povećava propusnost kisika na 6 sati<sup>9</sup>
- Iznimna stabilnost, predvidiva rotacija leće i uspjeh fita<sup>10</sup>

## Visoka propusnost kisika za zdravlje očiju Vaših pacijenata s astigmatizmom



AIR OPTIX for ASTIGMATISM propušta do **7 puta više kisika** od vodećih hidrogel toričnih leća s niskim Dk/t<sup>11</sup>.


To pomaže zaštititi Vaših pacijenata od znakova i simptoma deficita kisika na rožnici, za bjelije oči zdravog izgleda.

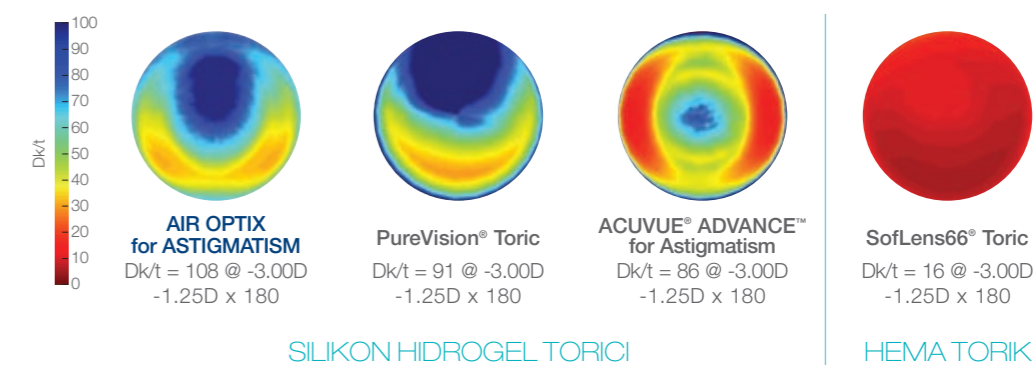


## Patentirani tretman površine leće doprinosi zdravlju očiju\*\*

### AIR OPTIX obitelj sfernih i toričnih leća —


- Obradena patentiranim, trajnim, biokompatibilnim plazma tretmanom površine
- Odbija naslage<sup>12</sup>
- Izvrsna vlažnost<sup>13</sup>

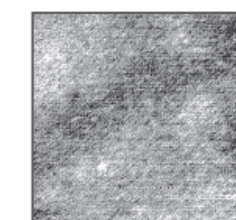

**AIR OPTIX**  
Trajni, kemijski povezan plazma tretman za glatku, kontinuiranu površinu<sup>14</sup>

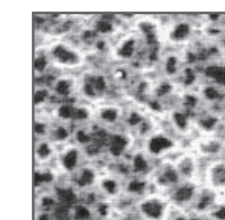

**ACUVUE® ADVANCE™**  
Nema trajnog plazma tretmana, površina je neravna<sup>14</sup>

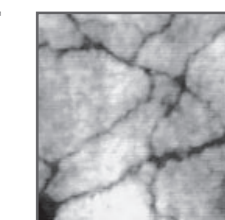

**PureVision™**  
Površina se sastoji od silikonskih otočića, koji ne pokrivaju u potpunosti površinu leće<sup>14</sup>